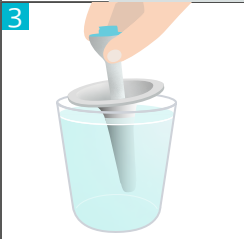
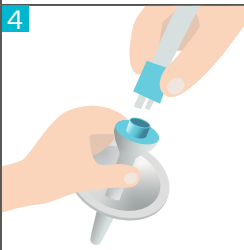
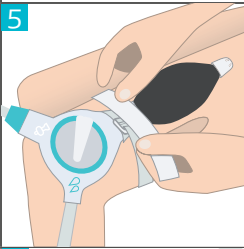
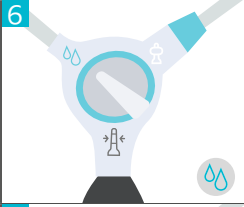
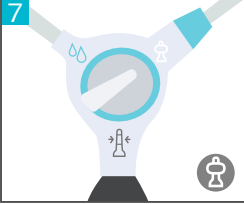
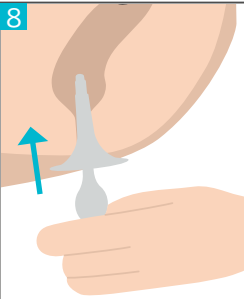
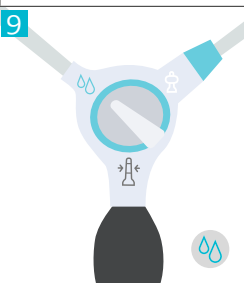
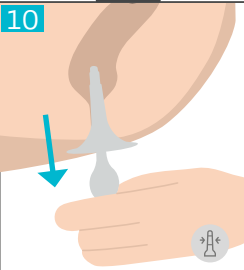


1		A. Voorbereiding Vul de waterzak met lauwwarm water (34–40°C). De temperatuur is juist wanneer de ronde temperatuurindicator op de waterzak groen is.
2		Draai de slang op het deksel; grijs op grijs en draai totdat deze goed vastzit.
3		Open de verpakking en plaats de conuskatheter in een beker met water. Wacht 30 seconden om de coating te activeren.
4		Bevestig de slang van de controle unit op de conuskatheter; turquoise op turquoise.
5		Bevestig de controle unit op je bovenbeen met de beenband. Dit mag maar hoeft niet.
6		Draai de knop naar het turquoise watersymbool. Pomp water in de slangen.
7		Draai de knop naar het ballonsymbool om het water te stoppen als alle lucht uit de slangen is.

8		B. Conuskatheter inbrengen Ga op het toilet zitten en breng de conuskatheter voorzichtig in je poepgaatje. Hou de conuskatheter vast of vraag een van je ouders om dat te doen.
9		C. Water pompen Draai de knop naar het watersymbool. Pomp langzaam de afgesproken hoeveelheid water in je darm. Afgesproken hoeveelheid water: _____ ml.
10		D. Verwijderen conuskatheter Als je genoeg water in je darmen hebt gepompt, draai je de knop naar het grijze symbool. Verwijder de conuskatheter uit je poepgaatje.
11		E. De darm legen Maak de controle unit los van je bovenbeen. Het enige wat je nu kan doen is wachten. Soms kan het een half uurtje duren. Ondertussen kan je iets leuks doen zoals lezen, puzzelen of een spelletje op de tablet.
12		F. Schoonmaken Als je klaar bent draai je de katheter los van de slang en gooi je deze weg. Draai de knop naar het eindsymbool. En giet het overige water uit de zak.
13		Laat de waterzak drogen en was je handen, je bent nu klaar.

Uitleg symbolen

-  Turquoise watersymbool
-  Wit ballonsymbool
-  Grijs leegloopsymbool
-  Turquoise eindsymbool

Deze instructiekaart is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing.
Ben je al ingeschreven voor Peristeen Support? Kijk op www.peristeen.nl voor meer informatie.



Bekijk de instructievideo van de conuskatheter op www.peristeen.nl