

Knipgids

Ontwikkeld door verpleegkundigen voor
verpleegkundigen



Biatain® Silicone Non-Border

Ontwikkeld door verpleegkundigen voor verpleegkundigen

Deze knipgids is ontwikkeld om u te ondersteunen bij het gebruik van Biatain® Silicone Non-Border en om u te helpen uw patiënten een optimale behandeling te geven.

De verschillende knip-technieken zijn gebaseerd op de klinische en praktische ervaring van wondverpleegkundigen die hun kennis met ons hebben gedeeld. De gids bevat diverse voorbeelden van hoe Biatain Silicone Non-Border kan worden geknipt, om wonden te behandelen op moeilijk te bedekken delen van het lichaam. Alle voorbeelden die gegeven worden zijn bedoeld als algemene leidraad en er wordt aangeraden altijd de maat van het product te kiezen en het zo te knippen, zodat het de individuele patiënt past.


Biatain Silicone Non-Border is een schuimverband met een zachte siliconen kleeflaag. Voor de bevestiging is een secundair verband nodig, dat in deze gids niet wordt getoond. Het product is ook geschikt voor gebruik in combinatie met compressietherapie. Bedek het volledige product niet met een occlusief secundair verband.

Raadpleeg voor gebruik altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en behandel de wond volgens de richtlijnen van uw organisatie.

Inhoudsopgave

Productoverzicht	4
Tips voor het aanbrengen.....	5
Grote teen of duim	6
Topje van een teen	8
Tussen de tenen	9
Enkel	13
Hiel	14
Knie	15
Vingers	16
Tussen de vingers	17
Rond een vinger	19
Palm van de hand	20
Rug van de hand	22
Elleboog	23
Schouder	24
Divers o.a. schouder	25
Oksel	26
Onder borst	27
Keel	28
Achter het oor	29

Productoverzicht

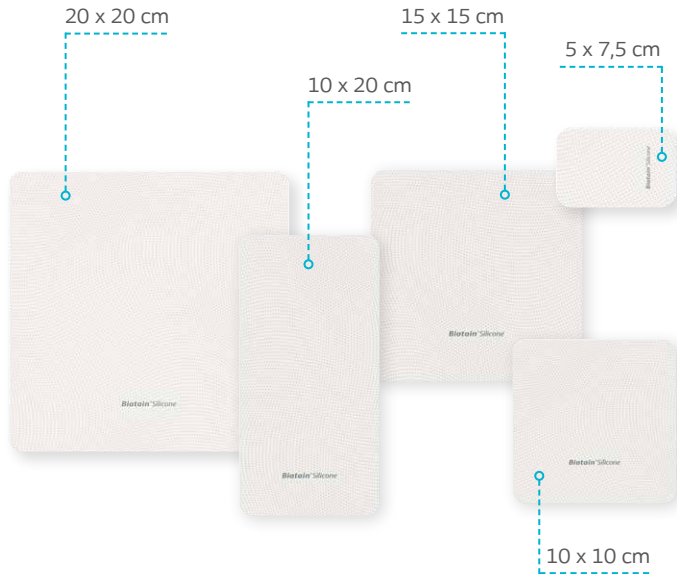

Biatain Silicone Non-Border

Art.nr.	Maat in cm	Verp.	ZI-nummer
39020	5x7,5	10	16959736
39021	7,5x7,5	10	binnenkort leverbaar
39022	10x10	10	16959744
39023	12,5x12,5	10	binnenkort leverbaar
39024	10x20	5	16959752
39025	15x15	5	16959760
39026	20x20	5	16959779

Bestel uw 10 x 10
sample hier:



Tips voor het aanbrengen

Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzing van het product.

1. Zorg ervoor dat de huid schoon en **droog** is.
2. Wees u ervan **bewust** dat het gebruik van crèmes, lotions, zalf of huidpreparaten het vermogen van siliconen om zich aan de huid te hechten kan verminderen. Indien een dergelijk product wordt gebruikt, laat de huid rond de wond dan drogen voordat u het product aanbrengt.
3. Wanneer u klaar bent om Biatain Silicone Non-Border aan te brengen, verwijder dan eerst de middelste beschermfolie en breng aan op het wondgebied. Raak de kleefzijde van het schuimkussen niet aan. **Strijk** vervolgens het verband **glad** langs de huid terwijl u de resterende beschermfolie verwijdert. Indien nodig kan het verband worden bijgeknipt zodat het op moeilijke plaatsen kan worden aangebracht.
4. Pas **fixatie** toe volgens het protocol van uw instelling en compressietherapie indien klinisch geïndiceerd.
5. **Laat** het verband op zijn plaats om de wondgenezing niet te verstoren. Verwissel het product wanneer klinisch geïndiceerd of volgens het protocol van uw instelling.
6. **Vervang** het verband wanneer zichtbare tekenen van exsudaat de rand van het schuim naderen.



Grote teen of duim - optie 1



Grote teen of duim - optie 2




Voor wonden aan de grote teen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Plooi het product en knip er een driehoekige vorm uit. Breng het product aan tussen de grote teen en de tweede teen en vouw het rond de grote teen alvorens het te fixeren met geschikt secundair verband. Voor de duim kan een soortgelijke methode gebruikt worden. Biatain Non-Adhesive is een goed alternatief wanneer het tussen de tenen te nat is voor siliconen.

Hoe te knippen:

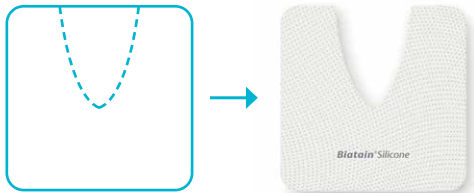


Scan de code voor
een instructievideo
over deze knipwijze

Voor wonden aan de grote teen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip twee hoekjes van het product af en breng het product aan vanaf de binnenzijde van de grote teen alvorens het te fixeren met geschikt secundair verband. Voor de duim kan een soortgelijke methode gebruikt worden. Biatain Non-Adhesive is een goed alternatief wanneer het tussen de tenen te nat is voor siliconen.

Hoe te knippen:

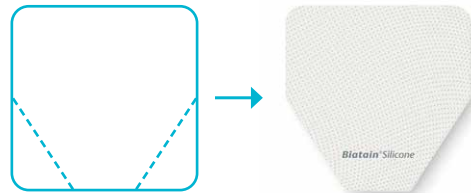

Scan de code voor
een instructievideo
over deze knipwijze

Topje van een teen



Tussen de tenen - optie 1




Voor wondjes aan het topje van een teen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Houd voor een optimale vorm rekening met de grootte van de teen en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

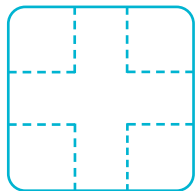


Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Houd voor een optimale vorm rekening met de grootte van de tenen en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband. Biatain Non-Adhesive is een goed alternatief wanneer het tussen de tenen te nat is voor siliconen.

Hoe te knippen:

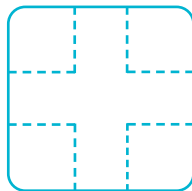

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Tussen de tenen - optie 2



Tussen de tenen - optie 3




Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm aan beide kanten van het product. Rond voor een betere pasvorm eventueel ook de hoeken af. Fixeer met geschikt secundair verband. Biatain Non-Adhesive is een goed alternatief wanneer het tussen de tenen te nattend is voor siliconen.

Hoe te knippen:

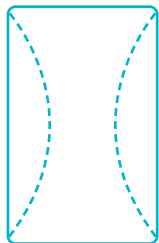

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Plooi het product en knip insnijdingen/gaatjes volgens het aantal te bedekken tenen. Vouw het verband vervolgens om de voet, zoals getoond op de afbeelding hierboven. Biatain Non-Adhesive is een goed alternatief wanneer het tussen de tenen te nattend is voor siliconen.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Tussen de tenen - optie 4



Voor wonden tussen de tenen.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Plooi het product en knip gaten volgens het aantal te bedekken tenen. Verwijder daarna de restjes van het uitgeknipte deel van het product. Vouw het verband vervolgens om de voet, zoals getoond op de afbeelding hierboven. Biatain Non-Adhesive is een goed alternatief wanneer het tussen de tenen te nat is voor siliconen.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Enkel




Voor wonden rond de malleolus op de voeten.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm zodat het verband rond de laterale malleolus van de voet past. Kan ook aangebracht worden rond de binnenste malleolus. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

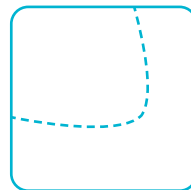

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Hiel




Voor wonden aan de hiel.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip het product in een vorm die geschikt is om op de hiel aan te brengen door twee driehoeken van een geschikte grootte af te knippen. Breng het bovenste bredere deel aan op de achillespees en vouw de onderste zijdelen om de hiel alvorens te fixeren met geschikt secundair verband. Als alternatief kunt u Biatain® Silicone Heel gebruiken.

Hoe te knippen:

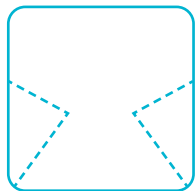

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Knie



Voor wonden aan de knie.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip het product in een vorm geschikt voor aanbrengen op de knie door twee driehoeken van een geschikte grootte af te knippen. Houd rekening met de beweeglijkheid van de knie, zorg dat het product blijft zitten in zowel flexie als extensie van de knie. Fixeer met geschikt secundair verband. Als alternatief kunt u Biatain® Silicone Multishape gebruiken.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Vingers



Tussen de vingers - optie 1




Voor wonden aan het topje van een vinger.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Houd voor een optimale vorm rekening met de grootte van de vinger en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

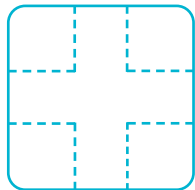


Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Voor wonden tussen de vingers.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 7,5 x 7,5 cm.

Knip het product in de vorm van een kruis. Houd voor een optimale vorm rekening met de grootte van de vingers en de afmetingen van het geknipte product. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

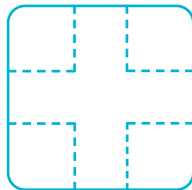

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Tussen de vingers - optie 2



Rond een vinger




Voor wonden tussen de vingers.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Knip een afgeronde vorm aan beide kanten van het product. Rond voor een betere pasvorm eventueel ook de hoeken af. Breng aan tussen de vingers. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

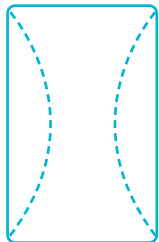

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Voor wonden aan een vinger.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 5 x 7,5 cm.

Vouw het product aan de lange kant op ongeveer 1/3 en knip een gat in het product zodat de vinger erin past. Pas zo nodig de zijkanten van het product aan zodat het tussen de vingers past. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Palm van de hand - optie 1



Palm van de hand - optie 2




Voor wonden aan de handpalm.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Vouw het product 1/3 naar beneden en knip gaatjes voor de drie middelste vingers. Verwijder de productrestjes en knip vervolgens een ronde insnijding die rond de basis van de duim past. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

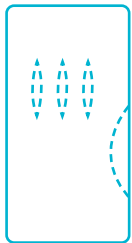


Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Voor wonden aan de handpalm.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip in de rechterbovenhoek een gat van geschikte grootte voor de wijsvinger. Knip vervolgens zoals afgebeeld een afgeronde hoek af zodat het in de handpalm en de basis van de duim past. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:

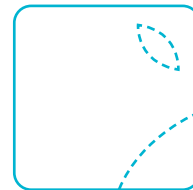

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Rug van de hand



Voor wonden aan de rug van de hand.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 12,5 x 12,5 cm.

Knip in de rechterbovenhoek een gat van geschikte grootte voor de wijsvinger. Knip dan een afgeronde hoek weg volgens de vorm van de rug van de hand. Fixeer met geschikt secundair verband.

Hoe te knippen:



Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze


Elleboog



Voor wonden aan de elleboog.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip het product in een vorm geschikt voor aanbrengen op de elleboog door twee driehoekjes van geschikte grootte af te knippen. Houd rekening met de beweeglijkheid van de elleboog, zorg dat het verband zowel in volle flexie als extensie van de elleboog blijft zitten. Fixeer met geschikt secundair verband. Als alternatief kunt u Biatain® Silicone Multishape gebruiken.

Hoe te knippen:

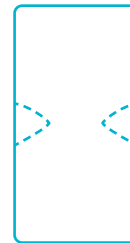

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Schouder



Divers


o.a. schouder



Voor wonden aan de schouder of andere hoekige zones.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip aan weerszijden van het verband openingen, zodat het past over gewrichten zoals de schouder of andere gebogen zones van het lichaam waar een dergelijke aanpassing nodig is. Fixeer met geschikt secundair verband of tape. Als alternatief kunt u Biatain® Silicone Multishape gebruiken.

Hoe te knippen:

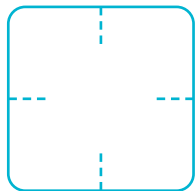


Scan de code voor
een instructievideo
over deze knipwijze

Voor wonden aan de schouder of andere hoekige zones.
Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip aan weerszijden van het verband openingen uit, zodat het veelvormig wordt en past over gewrichten zoals de schouder of andere gebogen anatomische gebieden waar een dergelijke aanpassing nodig is. Fixeer met geschikt secundair verband of tape. Als alternatief kunt u ook Biatain Silicone Multishape inzetten.

Hoe te knippen:

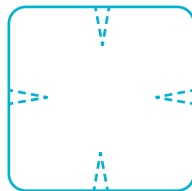

Scan de code voor
een instructievideo
over deze knipwijze

Oksel




Voor wonden aan de oksel.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 15 x 15 cm.

Knip een afgeronde hoek zodat het verband dicht aansluit aan de oksel. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

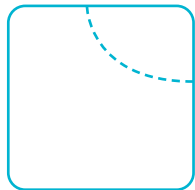

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Onder borst




Voor wonden rond of onder de borst, bijv. na een operatie.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Knip aan twee kanten van het product openingen zodat het onder de borst past. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

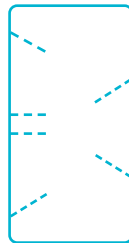

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Keel




Voor wonden aan de keel en nek.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 20 cm.

Kies een rechthoekig formaat en knip openingen aan twee kanten van het product zodat het op de keel past. Plaats de kant met de twee geknipte openingen langs de sleutelbeenderen, en de andere kant met drie geknipte openingen onder het kaakbeen. Fixeer met geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:

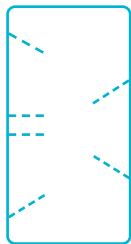

Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Achter het oor



Voor wonden achter het oor.

Productafmeting gebruikt in de afbeelding: 10 x 10 cm.


Knip het verband zo dat het achter het oor past. Fixeer met een geschikt secundair verband of tape.

Hoe te knippen:




Scan de code voor een instructievideo over deze knipwijze

Notities



A light gray rounded rectangular box containing ten horizontal lines for writing notes.

Notities



A light gray rounded rectangular box containing ten horizontal lines for writing notes.

Coloplast wil een betrouwbare en waardevolle partner zijn voor u als professional in de zorg. We luisteren naar uw behoeften - of het nu gaat om nieuwe producten of om verbetering van patiëntondersteuning.

Zo ondersteunen wij u via www.coloplastprofessional.nl met kennis en geven u de mogelijkheid best practices met uw collega's te delen - ook werken we actief met u samen om de zorgstandaard voor patiënten te verhogen.

Dit maakt het voor ons mogelijk om u te helpen bij het realiseren van uw doelen.

Wilt u meer weten over Coloplast en deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 – 454 44 45.

[Ostomy Care](#) | [Continence Care](#) | [Wound and Skin Care](#) | [Interventional Urology](#) | [Voice and Respiratory Care](#)

Coloplast BV, Softwareweg 1, 3821 BN Amersfoort. www.coloplast.nl

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2023-03.

Alle rechten voorbehouden Coloplast A/S. PM-25753

